Dcont® Sens
Folyamatos Cukormonitorozó Rendszer

Dcont® Sens és a Sens365 használata okosórával



Dcont® Sens óra alkalmazás

Az alkalmazás az alábbi információkat jeleníti meg:

A legutóbb mért cukorszint időpontja és a csatlakozási állapot

Cukorszint változás mértéke



A legutóbb mért cukorszint

Cukorszint diagram

Az óra kezdőképernyőjén csak akkor jelennek meg a komplikációk/widgetek, ha a beállított számlap alkalmas a megjelenítésükre

Android – Widget / komplikáció beállítások

A számlap és a komplikációk a **Wear** applikáción belül vagy az okosórán a kezdőlap hosszan történő megnyomásával állíthatók be.
Androidon az alábbi komplikációk állíthatóak be számlaptól függően:



Glükóz



Glükóz+idő


Trend



Mérő+Glükóz

iOS – Widget / Komplikációbeállítások

A számlap és a komplikációk a **Watch** applikáción belül vagy az okosórán a kezdőlap hosszan történő megnyomásával állíthatók be.
Apple Watch-on az alábbi komplikációk állíthatóak be számlaptól függően:



Idő+Glükóz




Mérő+Glükóz



Mérő+Glükóz+Idő



Idő+Glükóz+Diagram

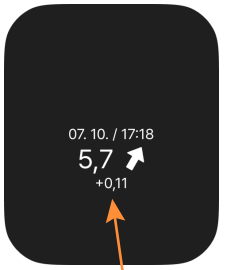

Idő+Glükóz+Trend

Értesítések

Győződjön meg arról, hogy az okoseszköz beállításaiban a riasztások mind az okoseszközre, mind az okosórára engedélyezve vannak.

Android

1. Nyissa meg a **Beállítások → Értesítések** menüt a telefonján.
2. Győződjön meg róla, hogy a **CareSens Air/Sens365 alkalmazás értesítései engedélyezve** vannak.
3. A **Samsung Wear alkalmazásban** is kapcsolja be az értesítések tükrözését az órára.
4. Ellenőrizze, hogy az **óra ne legyen Néma / Ne zavarjanak módban.**

iOS

1. Nyissa meg az **iPhone Beállítások → Értesítések** menüt.
2. Engedélyezze a **CareSens Air/Sens365 alkalmazás értesítéseit** (riasztások, hangok, jelvények).
3. Az **Apple Watch alkalmazásban** állítsa be:
4. Legyen bekapcsolva az értesítések tükrözése iPhone-ról.
5. Ellenőrizze, hogy az óra ne legyen **Csendes / Színház / Ne zavarjanak módban.**

Fontos

- Az óraalkalmazás a telefonnal kommunikál, nem közvetlenül a szenzorral, ezért a szenzor önállóan, okostelefon nélkül nem használható.
- Előfordulhat, hogy az értékek az okosórán néhány perces késéssel jelennek meg.
- Az alkalmazás kizárólag Samsung és Apple okosórákkal kompatibilis. A támogatott készülékek listáját a cgms.hu weboldalon a **Kompatibilitás** menüpontban találja.
- Ahhoz, hogy az okosóra megjelenítse az applikációból származó riasztásokat és értesítéseket, önnek engedélyeznie kell azt a Samsung Wear / Apple Watch applikációban.
- Az óra alkalmazás használatáról részletesebb információkat talál a cgms.hu weboldalon a **Termékek →** **Dcont® Sens** aloldalról letölthető Használati útmutatóban.

