Dcont® Sens

Folyamatos Cukormonitorozó Rendszer

HU

PCGAB-000091 REV1 2026-10

Biztonsági információk

A Dcont® Sens használata előtt figyelmesen olvassa el és szigorúan tartsa be az ebben a fejezetben felsorolt jelzéseket, ellenjavallatokat és figyelmeztetéseket.

Rendeltetésszerű felhasználó
A Dcont® Sens CGM rendszer rendeltetésszerű felhasználói a 2 éves és annál idősebb, cukorbetegségben szenvedő személyek. Gyermekeknél (2–13 éves korban) a rendszer kizárólag legalább 18 éves gondozó felügyelete mellett alkalmazható.

Alkalmazási javallatok
A Dcont® Sens folyamatos cukormonitorozó rendszer (Dcont® Sens CGM rendszer) a cukorszint folyamatos monitorozására szolgál az intersticiális folyadék glükózszintjének mérésével 2 éves vagy idősebb cukorbetegségben szenvedő betegeknél. A Dcont® Sens CGM rendszer célja, hogy felváltsa a cukorbetegség kezelésére vonatkozó döntések alapjául szolgáló, hagyományos otthoni vércukorszint vizsgálatot, amennyiben más orvosi indikáció nem áll fenn. A Dcont® Sens CGM rendszer a folyamatos cukorszint-információk biztosításával segít a trendek, például a hiperglikémia és hipoglikémia felismerésében, a cukorszint változásainak kezelésében a trendek felismerése és a mintázatok nyomon követése révén, valamint az egészségügyi személyzettel való konzultáció során segít a diagnózis felállításában és a kezelés megtervezésében.

Ellenjavallatok

- Röntgen-, MRI-, CT-vizsgálat, rádiófrekvenciás abláció, nagyfrekvenciás elektromos hőkezelés vagy nagy intenzitású fókuszált ultrahang előtt távolítsa el a szenzort. A mágneses mezők vagy a hő károsíthatja a készüléket, ami a glükózszint pontatlan méréséhez vagy riasztási hibákhoz vezethet.
- Az eszköz használata nem javasolt:
  - Csecsemők és 2 év alatti gyermekek
  - Terhes és szoptató nők
  - Dialízis alatt álló személyek és kritikus állapotú betegek számára

Figyelmeztetések

- Súlyos hipotenzió vagy sokk rendellenes méréseket eredményezhet. Ne alkalmazza ezt a terméket súlyos tünetekkel rendelkező betegeknél, mivel a ketoacidózis vagy a hiperozmoláris hiperglikémiás nem ketózisos állapot abnormálisan alacsony méréseket eredményezhet.
- A szenzort a felhasználói kézikönyvben található útmutatások szerint kell használni, és az ott megjelölt testrészre kell felhelyezni.
- A szenzor felhelyezése előtt alaposan mosson kezet szappannal és folyó vízzel, majd szárítsa meg. Törölje át alkoholos kendővel azt a területet, ahová fel szeretné helyezni a szenzort, majd szárítsa meg teljesen. Az előírások be nem tartása fertőzéshez vezethet.
- Ne használja a terméket, ha a szenzor csomagolása sérült vagy fel van nyitva. Ez fertőzéshez vezethet.
- Ne használjon sérült vagy hibás szenzort. Ez fertőzéshez vezethet.
- A szenzor ajánlott felhelyezési helye életkoronként eltér:
  - 2–6 éves gyermekeknél a szenzor gondozó felügyelete mellett a fenék felső részén vagy a felkar hátsó részén viselhető.
  - 7 éves és annál idősebb felhasználóknál a szenzort a felkar hátsó részére helyezze fel. Nincs elegendő tapasztalat a szenzor megfelelő működésére, ha a test más részére helyezik fel.
- Az applikátorcsomag felnyitása után a szenzort azonnal fel kell helyezni a levegőből származó szennyeződés elkerülése érdekében.
- Ne távolítsa el az applikátoron található kioldógombzárat, amíg nem áll készen a szenzor felhelyezésére. Az előírások be nem tartása baktériumok által okozott fertőzéshez vezethet.
- A kioldógombzár eltávolítása után ügyeljen arra, hogy az applikátort ne irányítsa más személy felé.
- Ne nyomja meg az applikátor kioldógombját, amíg nem áll készen a szenzor felhelyezésére.
- Ha inzulinpumpát használ, a szenzort a pumpától legalább 8 cm távolságra helyezze el.
- Ha a szenzor felhelyezése során a szenzorszál eltörik vagy leválik, ellenőriznie kell, hogy a szenzorszál a bőr alatt maradt-e. Ha nem látja szabad szemmel a szenzorszálat, kérjen orvosi segítséget. Ha fertőzés miatt gyulladást, bőrpírt, duzzanatot vagy fájdalmat tapasztal azon a helyen, ahol a szenzort rögzítették, kérjen segítséget egészségügyi szakembertől.
- Ha a szenzor rögzítésének helyén véraláfutást, fájdalmat vagy erős vérzést tapasztal, hagyja abba a használatot, távolítsa el a szenzort, majd azonnal forduljon orvoshoz vagy egészségügyi szakemberhez.
- Ha a szenzor csatlakoztatásakor erős vérzés jelentkezik, nincs megfelelően felhelyezve a szenzor, vagy rendellenes méréseket tapasztal, távolítsa el a szenzort, és helyezzen fel egy újat a test valamely másik részére.
- Váltson felhelyezési területet minden új szenzor felhelyezésekor. Ha az új szenzort rendszeresen egy korábban már használt területre helyezi fel, az bőrirritációt vagy hegesedést okozhat.
- A felhelyezéshez kiválasztott helynek meg kell felelnie a következő kritériumoknak:
  - Legalább 8 cm távolságra kell lennie az inzulinpumpa infúziós szerelékétől vagy az infúzió helyétől.
  - Nem lehet közel a derékszíjhoz, tetoválásokhoz, csontokhoz, hegekhez vagy irritált bőrfelülethez.
  - Olyan területre kell felhelyezni, ahol alvás közben nem fogja megütni, megnyomni vagy meglökni.
  - 2–6 éves korban a szenzor gondozó felügyelete mellett a fenék felső részén vagy a felkar hátsó részén viselhető.
  - 7 éves kortól a szenzor kizárólag a felkar hátsó részén használható.
- A szenzor bőrhöz való rögzítésére használt ragasztótapasz és a szenzor behelyezését segítő vezetőtű egyes felhasználóknál allergiás reakciót (bőrpírt vagy ödémát), illetve viszketést válthat ki. Ha ez megtörténik, azonnal távolítsa el a ragasztótapaszt és/vagy a szenzort, és forduljon orvoshoz vagy egészségügyi szakemberhez.
- A csomagban található nedvszívó anyagot tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől.
- Ne egye meg a csomagban található nedvszívó anyagot.
- Ha a nedvszívó anyag tartalma a szemébe kerül, azonnal alaposan mossa ki folyó vízzel. Ha bármilyen problémát tapasztal, forduljon orvoshoz.
- A szenzor lenyelése fulladást okozhat. Kérjük, ügyeljen rá, hogy ne kerüljön gyermekek kezébe.
- A Dcont® Sens segítségével mért glükózszint nem helyettesítheti az egészségügyi szakember általi ellátást, és önmagában nem használható a diabétesz diagnosztizálására. Kizárólag arra szolgál, hogy glükóz adatokat szolgáltasson a betegek számára, hogy segítse őket a mindennapi diabéteszkezelésében, valamint segítse az egészségügyi szakembereket a diagnózis felállításában és a megfelelő kezelés kidolgozásában.
- Ha úgy találja, hogy a Dcont® Sens CGM rendszer által kijelzett cukorszint nem pontosan tükrözi a tüneteit, ellenőrizze hagyományos vércukorszintmérővel a kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalához. Végezze el a szükséges beavatkozásokat, vagy kövesse az orvos utasításait.
- Legyen tisztában a szenzor teljesítményének lehetséges változásaival, különösképpen a szenzor felhelyezését követő korai időszak során.
- Ha a valós idejű cukorszint nem ellenőrizhető (például a szenzor bemelegedési időszakában, rendszerhiba esetén, vagy ha a cukorszint változásának irányát jelző nyíl helyén „…” jelenik meg), illetve ha a szenzor által aktuálisan mért cukorérték nem egyezik az Ön tüneteivel vagy várakozásaival, ne hozzon kezelési döntést ezen értékek alapján. Ehelyett használjon vércukorszintmérőt a kezelési döntések meghozatalához.
- A gondozók nem hozhatnak kezelési döntéseket a Sens365 alkalmazásból származó adatok alapján. A megosztott cukorszintértékek késleltetve érkezhetnek, nem valós idejűek, ezért nem alkalmasak azonnali döntéshozatalra vagy beavatkozásra. Ez vonatkozik az alacsony vagy magas glükózszintre figyelmeztető riasztásokra is, amelyeket a gondozók kapnak. Kezelési döntéseket kizárólag a felhasználó alkalmazásában megjelenő valós idejű adatokra alapozva szabad meghozni.
- Ha úgy találja, hogy a szenzor által mért értékek nem pontosan tükrözik az egészségi állapotát, hagyományos vércukorszintmérővel ellenőrizheti azokat.
- Ne kalibráljon, ha a glükózszintje túl gyorsan változik (percenként 0,1 mmol/L (2 mg/dL) vagy annál nagyobb mértékben). Ez befolyásolhatja a szenzor pontosságát.
- Ne használjon a kalibráláshoz az ujjbegyén kívül más testrészről (tenyér, alkar stb.) származó mintát. Az eredmény eltérhet az ujjbegyből származó minta glükózszintjétől, és ez befolyásolhatja a szenzor mért glükózértékének pontosságát.
- Ha az ujjbegyből vett mintával végzett mérés eredménye 0,6 mmol/L (10 mg/dL) alatti vagy 33,3 mmol/L (600 mg/dL) feletti, nem használható kalibrációs értékként.
- Ha a kalibrációs érték pontatlan, a Dcont® Sens nem tud pontos glükózértékeket biztosítani. Ha azt észleli, hogy a szenzor által mért értékek nem tükrözik pontosan az Ön egészségi állapotát a kalibrálás után, ne hozzon kezelési döntéseket a Dcont® Sens alapján.
- A megfelelő kezelési döntések meghozatalának elősegítése érdekében állítsa be a riasztásokat úgy, hogy azok az Ön számára könnyen észlelhetőek legyenek, és rendszeresen ellenőrizze a kijelzőt, hogy ne maradjon le egyetlen riasztásról sem.
- Ellenőrizze, hogy az okoseszközén a hangerő be van kapcsolva, és az eszköz nincs lenémítva. Ha a telefonja némított állapotban van, nem fogja hallani a riasztásokat.
- Ha másik hangeszköz, például fejhallgató van csatlakoztatva, a riasztások csak a csatlakoztatott eszközön keresztül szólalnak meg, az okoseszköz hangszóróján keresztül nem. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz megfelelően van-e konfigurálva a riasztások fogadásához.
- Ha az okoseszköz vagy az alkalmazás értesítései némított állapotban vannak, a riasztásokhoz nem fog hang- vagy rezgésjelzést kapni. A vizuális figyelmeztetések azonban továbbra is megjelennek az eszköz kijelzőjén.
- Az operációs rendszer minden alkalommal manuálisan történő frissítéséhez tiltsa le az okoseszköz automatikus operációs rendszer (OS) frissítéseit. Az operációs rendszer egyes funkcióit befolyásolhatják a CareSens Air alkalmazás beállításait és a riasztások fogadását. Az operációs rendszer frissítését követően mindig ellenőrizze a készülék beállításait, hogy meggyőződjön a CareSens Air alkalmazás megfelelő működéséről.
- A CareSens Air alkalmazás adatai elveszhetnek, ha nem töltik fel őket a felhőalapú szerverre.
- Ha a szenzor használata közben törli az okoseszközön futó alkalmazást, az alkalmazás által mentett összes adat elvész. Ha törölnie kell az alkalmazást, vagy másik okoseszközre kell váltania, először töltse fel az adatokat a felhőalapú szerverre vagy mentse el a biztonsági mentést tartalmazó fájlt egy külön tárolóeszközre.
- A termék egy gombelemet tartalmaz. Lenyelése esetén a lítium gombelem 2 órán belül súlyos vagy halálos sérülést okozhat. Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely nyílásába helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.
- Gyermekek (2–13 évesek) esetében a javallat kizárólag azokra vonatkozik, akik legalább 18 éves gondozó felügyelete alatt állnak. A gondozó feladata, hogy segítsen a gyermeknek a szenzor kezelésében és a szenzor által mért cukorértékek értelmezésében. Ha 2–6 éves gyermeknél a szenzort a felkar hátsó részére helyezik fel, a gondozónak rendszeresen ellenőriznie kell, hogy a szenzor továbbra is megfelelően rögzül-e. A szenzor stabilabb rögzítése érdekében kiegészítő rögzítőtapasszal is rögzíthető.

Kockázatok és előnyök

Kockázatok
A Dcont® Sens CGM rendszer használatának kockázatai:

- Elmaradt riasztások
- Visszamaradt szenzorrész
- Szenzor fedőtapasza által kiváltott irritációk
- Helytelen kezelési döntések

Elmaradt riasztások
Annak érdekében, hogy ne maradjon le a Dcont® Sens CGM rendszer figyelmeztetéseiről, követnie kell az i-SENS által ajánlott beállításokat az okoseszközén. Részletes információkat talál a CareSens Air alkalmazásban a **Beállítások** > **Oktatóanyagok** felületen. További információkért lásd az elektronikus használati útmutatóban az „Ajánlott okoseszköz-specifikációk”, a „Riasztások használata” és a „Gyakran ismételt kérdések” című fejezeteket.
Szenzor fedőtapasza által kiváltott irritációk
A Dcont® Sens CGM rendszerhez tartozó fedőtapasz megfelelt a biológiai stabilitási vizsgálatokon. Az irritációk a legtöbb esetben enyhék, vagy egyáltalán nem jelentkeznek. A klinikai vizsgálat során néhány résztvevőnél enyhe bőrpír és duzzanat jelentkezett, ami nem jelentett jelentős egészségügyi kockázatot. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
Visszamaradt szenzorrész
Nem valószínű, hogy a Dcont® Sens szenzorszála letörik vagy leválik, és a bőr alatt marad, ahogyan ez a klinikai vizsgálatok során sem történt meg. A bőr alatt maradó sterilizált szenzorszálak általában nem jelentenek jelentős egészségügyi kockázatot. Ha a szenzorszál letörik vagy leválik, a bőr alatt marad, és fertőzés vagy gyulladás jeleit mutatja, kérjük, forduljon az egészségügyi szolgáltatójához és jelezze a magyarországi hivatalos forgalmazó felé.
Helytelen kezelési döntések
A Dcont® Sens segítségével a felhasználók kezelési döntéseket hozhatnak. Ugyanakkor, ha olyan helyzetben történik beavatkozás, amikor nem lett volna szabad döntést hozni, fennáll a veszélye annak, hogy a felhasználó túlzott vagy ismétlődő mennyiségű inzulint kap, ami súlyos következményekkel járhat. Az ilyen esetek elkerülése érdekében feltétlenül olvassa el a használati útmutató „Biztonsági tudnivalók” és „4. Terápiával kapcsolatos döntések” című fejezeteit, mielőtt bármilyen kezelési döntést meghozna.

Előnyök
A Dcont® Sens CGM rendszer használatának előnyei:

- A hiperglikémia és hipoglikémia megelőzése magas és alacsony glükózszintre vonatkozó riasztásokkal
- A glükóztrendek és -minták nyomon követése a jobb diabéteszkezelés érdekében
- Csökkenti az ujjbegyből történő vérvétellel járó kellemetlenségeket

Trendek és minták nyomon követése
A Dcont® Sens CGM rendszer folyamatos cukorszint-információk nyújtásával segít a hiperglikémia és hipoglikémia felismerésében, a trendek és mintázatok elemzésével hozzájárul a cukorszint-változások kezeléséhez, jobb döntések meghozatalára ösztönzi a pácienst az étkezési és testmozgással kapcsolatos szokások terén, valamint támogatja a diagnózis felállítását és a kezelést az egészségügyi szakszemélyzettel való konzultáció során.
Folyamatos tájékoztatás
Ha Ön diabétesszel küzd, rendkívül fontos, hogy valós időben kezelje a glükózszintjét. A Dcont® Sens CGM rendszer riasztások segítségével értesíti Önt, ha a glükózszintje túl magas vagy túl alacsony, illetve gyorsan változik. A riasztások segítségével jobban tudja kezelni a diabéteszét.
Csökkenti az ujjbegyből történő vérvétellel járó kellemetlenségeket
A Dcont® Sens használatára támaszkodva kezeléssel kapcsolatos döntéseket hozhat. Ez helyettesítheti a vércukorszintmérőkhöz szükséges, ujjbegyből történő vérmintavételt, ezáltal csökkenti a fájdalmat és a kényelmetlenséget a felhasználó számára, mindaddig, amíg a tünetei és a vércukorszint folyamatos ellenőrzése konzisztens eredményeket mutat. Az eseményekkel kapcsolatos további részleteket lásd a felhasználói kézikönyv „4. Terápiával kapcsolatos döntések” című részében.

Magyarországon elérhető

A Dcont® Sens CGM rendszer hivatalos magyarországi forgalmazója a 77 Elektronika Kft. A CareSens Air mobilalkalmazás magyar nyelven is elérhető Android készülékeken a Google Play áruházban, iOS eszközökön az App Store kínálatában.

A Dcont® Sens bemutatása

⚠ Figyelmeztetés
A Dcont® Sens CGM rendszer segítségével mért glükózértékek nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást. Kizárólag arra szolgálnak, hogy a beteg számára adatokat szolgáltassanak a glükózszint változásairól, hogy segítsék a diagnózis felállítását és a kezelés kialakítását az egészségügyi szakemberrel folytatott konzultáció során.

A Dcont® Sens szenzor a CareSens Air alkalmazással való használatra készült.

A használat jelentősége

A hagyományos vércukorszintmérők meghatározott időpontokban mérik a glükózszintet, és nem mutatják meg, hogyan változik a glükózszint, illetve nem adnak áttekintést a glükózszint időbeli változásairól. A Dcont® Sens CGM rendszer azonban segít a diabétesz kezelésében azáltal, hogy folyamatosan méri a szövetközi folyadék glükózszintjét, és adatokat szolgáltat a felhasználónak a glükózszint változásának tendenciáiról.
A folyamatos glükózmonitorozás a vér glükózkoncentrációját a szövetközi folyadék glükózkoncentrációjának mérésével számítja ki. Amikor azonban a vérben lévő glükóz koncentrációja megváltozik, a szövetközi folyadékban lévő glükóz koncentrációja körülbelül 5–15 perccel később követi azt.

A termék részei

A Dcont® Sens szenzor csak egyszeri használatra készült. A szenzor a csatlakoztatás után nem használható újra.
A csomag tartalma a következő. A csomag felbontása előtt győződjön meg arról, hogy minden tartozék megvan.

⚠ Figyelmeztetés

- Ne használja a terméket, ha a szenzor csomagolása sérült vagy fel van bontva. Ez fertőzéshez vezethet.
- A csomagban található nedvszívószert tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől.
- Ne egye meg a csomagban található nedvszívószert.
- Ha a nedvszívószer tartalma a szemébe kerül, azonnal alaposan mossa ki folyó vízzel. Ha bármilyen problémát tapasztal, forduljon kezelőorvosához.



Applikátor | Használati útmutató | Fedőtapasz | CareSens Air alkalmazás

🔎 Megjegyzés


- A szenzor az applikátoron belül helyezkedik el.
- Az applikátor és a szenzor színe a terméktől függően eltérő lehet.

Applikátor

Az applikátor a szenzor védelmére és a szenzor bőrre történő rögzítésére szolgál.

🔎 Megjegyzés

- Az applikátor csak egyszeri használatra készült, és nem használható újra.
- Ne nyomja meg a kioldógombot, amíg el nem távolította a kioldógombzárat az applikátorról, és nem áll készen a szenzor felhelyezésére.

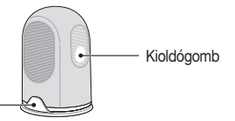

Az applikátor alkatrészeit a következő elnevezések jelölik:


Név	Funkció
Kioldógombzár	Ez megakadályozza, hogy a szenzor véletlenül kioldódjon.
Kioldógomb	A gomb megnyomásakor a szenzor kiold, és rögzül a felhasználó testén.

Szenzor

A szenzor méri a glükózszintet, és továbbítja a mért értékeket az okoseszközre.

🔎 Megjegyzés

- A szenzor vízálló. A termék vízállóságát 24 órán keresztül, 1 méter mélységben tesztelték.
- Ügyeljen arra, hogy 1,0 mm-nél kisebb átmérőjű szilárd tárgyak ne kerüljenek a szenzor belsejébe.
- Az okoseszköz és a szenzort egymástól 6 méteres távolságon belül kell tartani. Ha az okoseszköz és a szenzor között folyadék vagy akadály van, az adatátviteli távolság csökkenhet.
- A szenzor a csatlakoztatása után 15 napig érvényes. A lejárati dátum előtt a rendszer riasztást jelenít meg.
- Ügyeljen arra, hogy a szenzort a lejáratkor vagy a lejárati dátum előtt eltávolítsa.

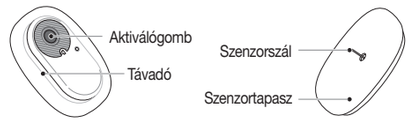

Az alábbi táblázat a szenzor különböző alkatrészeinek nevét és funkcióját ismerteti.

Név	Funkció
Aktiválógomb	Bekapcsolja a szenzor áramellátását.
Távadó	Beépített akkumulátorral rendelkezik. A szenzorszálon keresztül mért glükózkoncentráció-értékeket a távadó a felhasználói alkalmazásra küldi.
Szenzortapasz	A szenzort a felhasználó bőréhez rögzíti.
Szenzorszál	A felhasználó glükózszintjét méri.

CareSens Air alkalmazás

A felhasználók a CareSens Air alkalmazás segítségével az okoseszközeiken monitorozhatják a szenzorral mért glükózértékeket. Az alkalmazásban elérhető glükóztrendeket jelölő nyilak, glükóztrendek (grafikonok), események és kalibrációs értékek lehetővé teszik a glükóz hatékonyabb monitorozását.
Regisztráljon és jelentkezzen be ahhoz, hogy feltöltse a CareSens Air alkalmazásban mentett adatokat a felhőalapú szerverre. Ha a Dcont® Sens használatához bejelentkezett az alkalmazásba, akkor is betöltheti a biztonsági mentési adatokat, ha elveszíti az okoseszközét.

A termék ártalmatlanítása

Orvostechnikai eszköz ártalmatlanításakor be kell tartani az adott ország orvosi hulladék kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó előírásait. A termék ártalmatlanításával kapcsolatos kérdések esetén forduljon a viszonteladóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz

Szimbólumok magyarázata

Az alábbi táblázat az IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) által az orvosi gyakorlatban használt elektromos berendezések grafikus szimbólumait sorolja fel. Ezek a szimbólumok nemcsak a termékkel és a termék használatával, hanem a biztonsággal kapcsolatos további információkat is tartalmaznak.

Szimbólum	Leírás
CE	CE jelölés
EU REP	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben/Európai Unióban
MD	Orvostechnikai eszköz
	Vigyázat
	Ne használja fel újra
	Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót
	Lásd a használati útmutatót/füzetet
	BF típusú pácienssel érintkező alkatrész
	Napfénytől távol tartandó
	Szárazon tartandó
	WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
	Hőmérsékleti határérték
	Páratartalom határérték
	Légköri nyomás határértéke
	Ne használja, ha a csomagolás sérült. Olvassa el a használati útmutatót.
IP	Idegen anyag vagy víz behatolása elleni védelem szintje
STERILE EO	Etilén-oxiddal sterilizálva
	Egyszeres steril védőrendszer külső védőcsomagolással
	Gyártó
	Importőr
LOT	Tételszám
SN	Sorozatszám
	Lejárati dátum

i-SENS, Inc.
43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646
Republic of Korea
CareSensAir.com

EU REP **Medical Technology Promedt Consulting GmbH**
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Germany

CE 0123 MD

© 2026 i-SENS, Inc. All Rights Reserved.

Használat

1. Az alkalmazás telepítése és felhasználói fiók regisztrálása

Keressen rá a CareSens Air alkalmazásra a GET IT ON Google Play vagy a Download on the App Store felületén, telepítse, majd végezze el a regisztrációt.

Megjegyzés
CareSens Air alkalmazás letöltése
A CareSens Air alkalmazás letöltéséhez gépelje be a hivatkozást a böngészőbe, vagy olvassa be a QR-kódot.
https://www.caresensair.com/content/download_03

1. Indítsa el a CareSens Air alkalmazást az okoseszközén, és koppintson a **Fiók létrehozása** lehetőségre. Adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, fogadja el a kötelező feltételeket, majd végezze el az e-mail-cím megerősítését.


2. A szenzor csatlakoztatása

Olvassa be a csomagolás címkéjén található QR kódot a szenzor csatlakoztatásához az okoseszközzel.
Csatlakoztassa a szenzort a bőréhez, koppintson a **Párosítás indítása** elemre az alkalmazásban, majd nyomja meg a bekapcsológombot. Várjon, amíg az érzékelő csatlakoztatása befejeződik.

2. Indítsa el a CareSens Air alkalmazást az okoseszközén, és jelentkezzen be. Végezze el az alábbi műveletsort ebben a sorrendben: koppintson a **Biztonsági információk** lehetőségre, olvassa el a „biztonsági információkat”, koppintson a **Szenzorinformációk beolvasása** lehetőségre.
3. Olvassa be a szenzor alumínium csomagolásán található címke QR kódját, vagy manuálisan írja be a sorozatszám utolsó 4 számjegyét és a 6 jegyű PIN kódot.

Megjegyzés
- Lejárt szavatosságú szenzor nem használható. Használat előtt ellenőrizze a lejárati dátumot.
- Ügyeljen arra, hogy a szenzor csomagolásának címkéjén jelzett adatokat helyesen írja be. A szenzor nem tud csatlakozni, ha rossz sorozatszámot vagy PIN-kódot ad meg.


4. Nyissa ki a Dcont® Sens szenzor csomagolását. Vegye ki az applikátort a csomagolásból, és helyezze sima, stabil felületre.
5. Fogja meg az applikátort, és távolítsa el róla a kioldógombzárat.
6. A kioldógombzár eltávolítása után helyezze az applikátort az ábrán látható módon a rögzítési területre.
   - 2–6 éves korban a szenzor gondozó felügyelete mellett a fenék felső részén vagy a felkar hátsó részén viselhető.

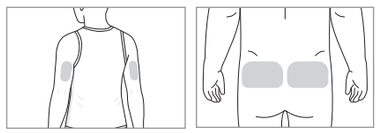


   - 7 éves kortól a szenzort kizárólag a felkar hátsó részén használja.
7. Nyomja meg a kioldógombot. Az applikátorból kikerülő szenzor felhelyezésre kerül a bőrre.
8. Távolítsa el az applikátort, és győződjön meg arról, hogy a szenzor megfelelően lett felhelyezve.
9. Koppintson a **Párosítás indítása** elemre.
10. Nyomja meg az aktiválógombot, amíg egy kattanást nem hall. A gomb ekkor besüllyed. Várjon, amíg a szenzor csatlakoztatása befejeződik.


- A Dcont® Sens Folyamatos Cukormonitorozó Rendszerrel kapcsolatos súlyos incidens esetén kérjük, értesítse a gyártót és az illetékes hatóságot az Ön országában.
- Az i-SENS, Inc. körültekintően járt el a jelen kézikönyvben található információk összeállítása során, hogy azok a lehető legpontosabbak legyenek. Az i-SENS azonban nem vállal felelősséget az útmutatóban található hibákért vagy hiányosságokért. Az i-SENS a termék megbízhatóságának, funkcióinak vagy kialakításának javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen útmutatóban leírt terméket vagy bármely kapcsolódó szoftveralkalmazást.
- Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. Az i-SENS előzetes beleegyezése nélkül szigorúan tilos a jelen kézikönyv másolása vagy módosítása.



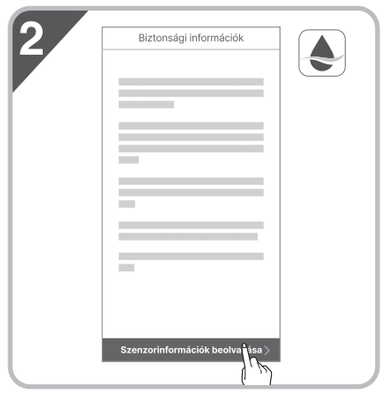





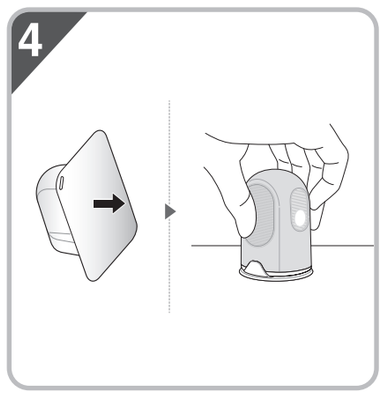


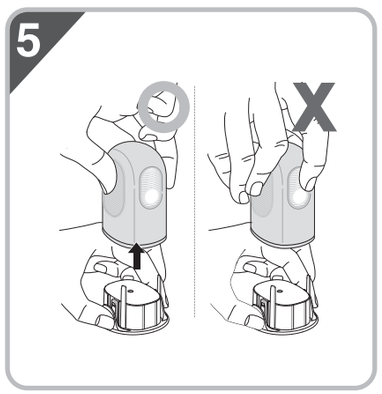




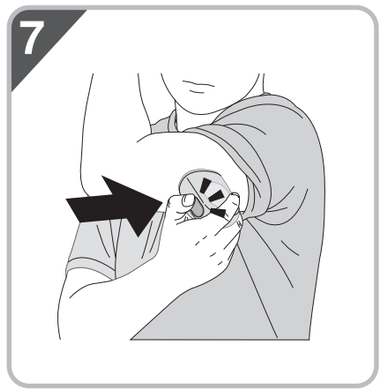

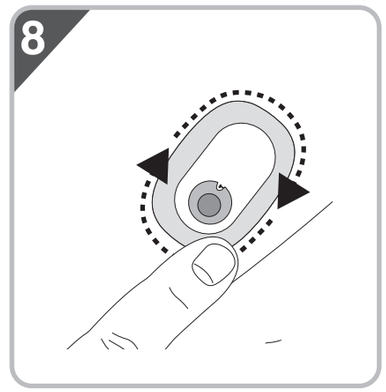

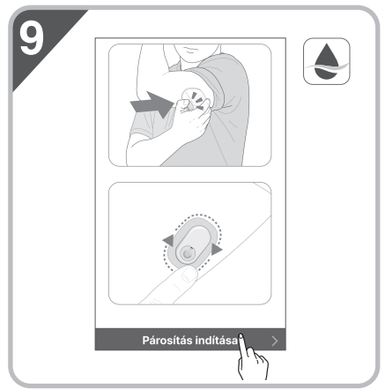

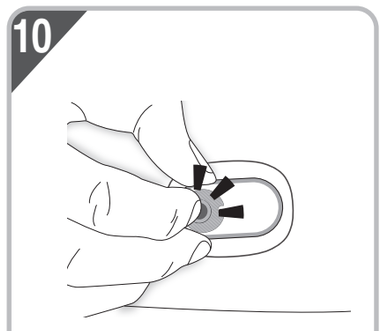

Használati útmutató letöltése

A Dcont® Sens Használati útmutatójának letöltéséhez gépelje be a hivatkozást a böngészőjébe, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot. A hibaelhárítással kapcsolatos további információkért forduljon a legközelebbi hivatalos forgalmazóhoz.

https://dcontsens.cgms.hu/hasznalatiutmutato