i·sens

HU

Használati útmutató

Sens 365 Web



Ez a használati útmutató a Sens365 Web megfelelő használatának segítésére szolgál.
A Sens365 Web lehetővé teszi a CareSens Air folyamatos glükózmonitorozó (CareSens Air CGM) rendszert használó szenzorfelhasználók adatainak megtekintését.
Figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és használat előtt tartsa be az összes óvintézkedést.

Megjegyzés
A Sens365 Web használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
A Sens365 a CareSens Air CGM rendszer másodlagos megjelenítő alkalmazása, és nem szolgál kezelési döntések meghozatalára vagy egészségügyi szakember tanácsának a helyettesítésére. A Sens365 nem garantálja a CareSens Air CGM rendszer felhasználója glükózértékeinek valós idejű fogadását.

i·sens

Tartalomjegyzék

Mielőtt megkezdené az eszköz használatát.....6

A dokumentumban szereplő jelölések.....7
Biztonsági információk.....9

1 A Sens365 Web működésének megismerése.....11

Működési mechanizmus 11

2 Javasolt specifikációk a Sens365 Web használatához.....12

2.1 Javasolt operációs rendszer.....12

3 A Sens365 Web használata (általános felhasználók).....13

3.1 A Sens365 Web megnyitása 14

3.2 A kezdőképernyő bemutatása.....15

3.3 Jelentések megtekintése 17

Áttekintés 18
Ambuláns glükózprofil (AGP)..... 21
Összehasonlítás..... 22
Mintázatok 23
Trendek 24
Statisztikák..... 25
Események 26

3.4 Beállítások.....27

Profilinformációk módosítása 27
i-SENS-fiókok kezelése..... 28
Gondozók kezelése 29

3.5 A vevőkészülék csatlakoztatása 30
A vevőkészülék csatlakoztatása számítógéphez 30
A vevőkészülék képernyőjének bemutatása 31
A vevő funkcióinak áttekintése 33

4 A Sens365 Web használata (egészségügyi szakemberek) 34

4.1 Átváltás szakmai fiókra 35
Egészségügyi szakember hitelesítése 35

4.2 Az egészségügyi szakemberek felületének bemutatása 37

4.3 A csoportképernyő bemutatása 39

4.4 Csoportok kezelése 40
Csoportok hozzáadása 40
Szenzorfelhasználók meghívása 40
Egészségügyi szakember meghívása 40

4.5 A szenzorfelhasználók jelentésének megtekintése 41

4.6 Vevőkészülék-felhasználók kiválasztása 42

A. függelék – Inaktív fiókra vonatkozó szabályzat 43
A Sens365 inaktív fiókokra vonatkozó szabályzata 43
A szenzorfelhasználók adatainak védelme 43

B. függelék Technikai információk 44

B.1 Teljesítmény 44

B.2 Kiberbiztonság 46

Mielőtt megkezdené az eszköz használatát

- Ez a termék csak olyan személyes adatokat használ fel, amelyek gyűjtéséhez a felhasználó hozzájárult.
- A termékkel kapcsolatos részletekért forduljon a gyártóhoz, vagy látogasson el a weboldalra.
- Ellenőrizze, hogy a szoftver futtatásához használt eszköz be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e vezetékes/vezeték nélküli hálózathoz.

Megjegyzés

- Az említett szabványok és előírások a jelen használati útmutató kiadásának időpontjában érvényesek.
- Az i-SENS, Inc. körültekintően járt el a jelen kézikönyvben található információk összeállítása során, hogy azok a lehető legpontosabbak legyenek. Az i-SENS azonban nem vállal felelősséget az útmutatóban található hibákért vagy hiányosságokért. Az i-SENS a termék megbízhatóságának, funkcióinak vagy kialakításának javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen útmutatóban leírt terméket vagy bármely kapcsolódó szoftveralkalmazást.
- Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. Az i-SENS előzetes beleegyezése nélkül szigorúan tilos a jelen kézikönyv másolása vagy módosítása.
- A képek kizárólag illusztrációként szolgálnak. A készülék tényleges képernyői és megjelenése eltérhet a jelen kézikönyvben láthatóktól.
- A felhasználói kézikönyv nyomtatott példánya igény esetén ingyenesen elérhető. Nyomtatott példány igényléséhez forduljon a helyi hivatalos forgalmazóhoz vagy ügyfélszolgálathoz. A nyomtatott kézikönyvet a kéréstől számított 7 napon belül biztosítjuk. Az elérhetőségek a termék csomagolásán találhatók.

A dokumentumban szereplő jelölések

Jelölési konvenciók

A jelen kézikönyv az alábbi jelölési konvenciókat használja a tartalom megértésének elősegítésére.

Jelölési konvenciók	Leírás
Félkövér	A félkövér kiemelés a grafikus felhasználói felület elemeinek megjelenítésére szolgál, beleértve a menüket és a könyvtárakat.
„ ”	Az idézőjelek a grafikus felhasználói felület oldalainak, portáljainak és képernyőinek jelölésére szolgálnak.
„Kereszthivatkozások”	A „kereszthivatkozások” a dokumentum különböző szakaszaira való hivatkozásra szolgálnak.
Vizuális segédanyagok	A grafikus elemek, illusztrációk vagy képernyőképek formájában megjelenő vizuális segédanyagok segítik az olvasót a szöveg megértésében.
Táblázatok	A táblázatok nagy mennyiségű adat áttekinthető formában történő megjelenítésére szolgálnak.

Kiegészítő leírások és magyarázatok

Ezekre hivatkozva információt kaphat a kivételekről és korlátozásokról.

Megjegyzés
Ez olyan megjegyzendő hivatkozási helyzeteket jelöl, amelyek hasznos információval szolgálnak, vagy segítenek a termék használata során a veszélyek elkerülésében.

Biztonsági üzenetek

A jelen kézikönyv az alábbi típusú biztonsági üzeneteket használja a felhasználó figyelmeztetésére olyan helyzetekre, amikor a termék használata során óvintézkedések szükségesek:

⚠ Figyelmeztetés
Ez olyan lehetséges veszélyt jelöl, amely elkerülés hiányában súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ Vigyázat
Ez olyan helyzetet jelöl, amely elkerülés hiányában kisebb sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Szimbólumok magyarázata

Ezek a szimbólumok nemcsak a termékkel és a termék használatával, hanem a biztonsággal kapcsolatos további információkat is tartalmaznak.

Szimbólum	Leírás
CE	CE-jelölés
EU REP	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben/Európai Unióban
MD	Orvostechnikai eszköz
	Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót
	Gyártó
#	Modellszám
UDI	Egyedi eszközazonosító

Biztonsági információk

Terápiás javallat

A Sens365 a cukorszint folyamatos monitorozására szolgál a szövetközi folyadékban lévő glükóz mérése révén 18 éves vagy idősebb cukorbetegséggel élő betegek esetében. A Sens365 a rendeltetése szerint betegek, gondozók és egészségügyi szakemberek általi használatra szolgál, hogy a kompatibilis cukormonitorozó eszközökből származó korábbi cukorértékek áttekintésével, elemzésével és értékelésével segítse a cukorbetegségben szenvedő személyeket és az őket ellátó egészségügyi szakembereket a cukorbetegség hatékony kezelésében. A Sens365 felhőalapú webes szolgáltatásként (Sens365 Web) és okoseszközös alkalmazásként (Sens365 alkalmazás) érhető el.

A Sens365 Web nem szolgál orvosi döntések meghozatalára vagy egészségügyi szakember tanácsának a helyettesítésére. A betegeknek egyeztetniük kell egy egészségügyi szakemberrel, mielőtt bármilyen orvosi értelmezést vagy terápiás módosítást végeznének a szoftverből kapott információk alapján. Az egészségügyi szakembereknek ezen információkat a rendelkezésükre álló egyéb releváns klinikai információkkal együtt kell értékelniük.

A Sens365 Web egy másodlagos megjelenítő felület, amely lehetővé teszi a szenzorfelhasználók és az egészségügyi szakemberek számára a kompatibilis glükózmonitorozó eszközökből származó glükózértékek távoli megtekintését. A szoftver kizárólag másodlagos információforrásként szolgál, és nem várható el, hogy valós idejű glükózadatokat jelenítsen meg és közöljön.

Fontos információk a felhasználók számára

- A Sens365 használatához létre kell hoznia egy i-SENS-fiókot.
- A Sens365 a CareSens Air CGM rendszer másodlagos megjelenítő felülete, és nem szolgál kezelési döntések meghozatalára vagy egészségügyi szakember tanácsának a helyettesítésére. A Sens365 nem garantálja a CareSens Air CGM rendszer felhasználója cukorértékeinek valós idejű fogadását.
- A Sens365 használata előtt olvassa el és értse meg a figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket, és a használat során szigorúan tartsa be azokat. A Sens365-öt a használati útmutatóban szereplő utasításoknak megfelelően kell használni.

Figyelmeztetések

- A CareSens Air CGM rendszer felhasználói, valamint családtagjaik és gyámjaik nem hozhatnak kezelési döntéseket a Sens365 cukorértékei alapján. A Sens365 emellett nem nyújt egészségügyi tanácsot, és nem használható erre a célra. Kezelési döntés meghozatalához egészségügyi szakemberhez kell fordulnia.
- Az egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek kizárólag a rendelkezésükre álló egyéb klinikai információkkal együtt használhatják a Sens365 által biztosított adatokat kezelési döntésekhez vagy elemzésekhez.

Óvintézkedések

- A CareSens Air CGM rendszer felhasználójának be kell kapcsolnia a megosztási funkciót annak érdekében, hogy a rendszer elküldje a cukorértékeket a gondozója (családtagok, gyámok, egészségügyi intézmények, egészségügyi személyzet) számára. Ha a gondozók szeretnék megtekinteni a megosztott tartalmat, le kell tölteniük a Sens365 alkalmazást, és csatlakoztatniuk kell a CareSens Air CGM rendszer felhasználójához.
- A gondozók okoseszközeinek kapcsolódniuk kell az internethez ahhoz, hogy megtekinthessék a CareSens Air CGM rendszer felhasználója által a Sens365 alkalmazáson keresztül megosztott adatokat.
- Ha a CareSens Air CGM rendszer felhasználójának vagy a gondozónak (családtagok, gyámok, egészségügyi intézmények, egészségügyi személyzet) az okoseszköze ki van kapcsolva, repülőgép üzemmódban van vagy nem kapcsolódik az internethez, akkor elmaradhat a cukorértékek küldése vagy fogadása.
- A gondozók (családtagok, gyámok, egészségügyi intézmények, egészségügyi személyzet) a szenzorfelhasználóval együtt követhetik és értelmezhetik a CareSens Air CGM rendszer által biztosított glükózadatokat. A CareSens Air alkalmazásba azonban minden esetben a szenzort viselő személynek, azaz a szenzorfelhasználónak kell bejelentkeznie.
- Ha a gondozók (családtagok, gyámok, egészségügyi intézmények, egészségügyi személyzet) megszakítják a kapcsolatot, a CareSens Air CGM rendszer által küldött tartalom a továbbiakban nem tekinthető meg.

1 A Sens365 Web működésének megismerése

Működési mechanizmus

Ez a termék egy másodlagos megjelenítő szoftver, amely az i-SENS CareSens Air CGM rendszer által feldolgozott glükózadatokat gyűjti és tárolja. A rendszer képes az adatok továbbítására, valamint az információk Android és iOS rendszerű okoseszközökön történő megjelenítésére. Az i-SENS CareSens Air CGM rendszer által gyűjtött és feldolgozott glükózadatok az SSL (Secure Sockets Layer) titkosítási protokoll alkalmazásával biztonságosan továbbíthatók a gondozók (többek között családtagok, gyámok, egészségügyi intézmények és egészségügyi személyzet) számára.

2 Javasolt specifikációk a Sens365 Web használatához

A következő operációs rendszereket a gyártóik kompatibilisnek minősítették.

2.1 Javasolt operációs rendszer

Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a javasolt specifikációkat teljesítő operációs rendszert használ. A Sens365 Web megfelelő működése nem garantál olyan operációs rendszerek esetén, amelyeket nem minősítettek kompatibilisként.

Javasolt böngésző	Felbontás
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari	1280 × 800 képpont vagy nagyobb

OS (operációs rendszer)	Verzió
Windows	10 vagy újabb
Mac OS	11 vagy újabb

3 A Sens365 Web használata (általános felhasználók)

Megnyithatja a Sens365 Webet, és nyomon követheti a CareSens Air alkalmazás vagy a vevőkészülék által mért glükózértékeket. A Sens365 Webbe való bejelentkezéshez létre kell hoznia egy fiókot.
A Sens365 Web által kínált különböző funkciók használata növeli a cukorbetegség kezelésének hatékonyságát.

Ez a fejezet a következőkhöz nyújt segítséget:


1. A Sens365 Web elindítása és bejelentkezés.
2. Glükózjelentések megtekintése és értelmezése.
3. Glükózadatok megosztása gondozókkal és szakemberekkel.
4. Vevőkészülék csatlakoztatása az adatok megtekintéséhez.
5. A személyes információk szerkesztése, és az i-SENS-fiókok kezelése a beállítások módosításával.

3.1 A Sens365 Web megnyitása

1 Nyissa meg a böngészőjét és írja be a Sens365 Web URL-címét.
URL: https://sens365.com
A Sens365 Web eléréséhez kattintson a **Kezdés** gombra.

2 Jelentkezzen be i-SENS fiókjával.


- Ha még nem rendelkezik fiókkal, hozzon létre egyet. Kattintson a **Fiók létrehozása** gombra, majd erősítse meg e-mail-címét, fogadja el a kötelező feltételeket, adja meg a lakóhely szerinti országot, és töltse ki a felhasználói adatokat.
- i-SENS-fiókot közösségi bejelentkezési móddal is létrehozhat. Ebben az esetben azonban a későbbiekben is ugyanazt a közösségi bejelentkezési módot használja a bejelentkezéshez.
- Ha elfelejti jelszavát, vagy módosítani szeretné, az **Elfelejtette a jelszavát?** lehetőségre kattintva megváltoztathatja azt.

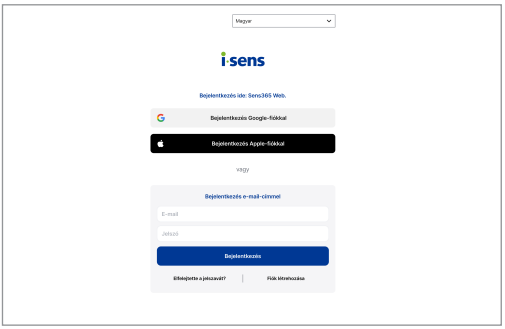

Megjegyzés
A jobb felső mezőben válassza ki az ön által preferált nyelvet.

3.2 A kezdőképernyő bemutatása

Az alábbi táblázat a Sens365 Web kezdőképernyőjére történő bejelentkezés után megjelenő alapvető információkat ismerteti.

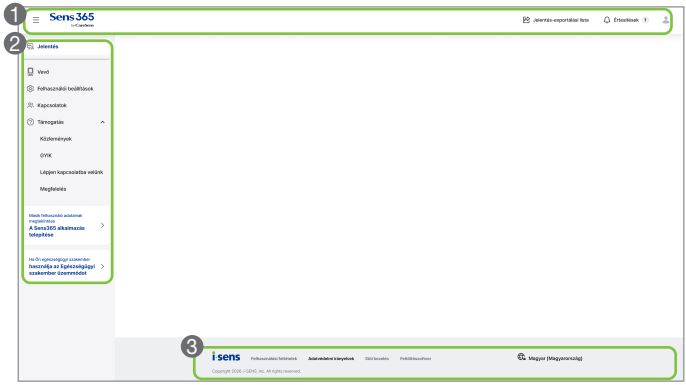

Sz.	Név	Leírás
❶	**Felső terület**	• Sens365 Kezdőlap gyorselérés: Ugrás a Sens365 kezdőlapjára. • Jelentés-exportálási lista: Jelentések hozzáadása és kezelése az exportlistában. • Értesítések: Értesítési naplók megtekintése, például meghívási listák és közlemények. • Profil: Profiladatok megtekintése és személyes adatok módosítása.

Sz.	Név	Leírás
❷	**Bal oldali menü**	• Jelentés: Egy adott időszakban rögzített glükózadatok elemzése és a glükózállapot ellenőrzése jelentések segítségével. • Vevő: Vevőkészülék csatlakoztatása a glükózadatok feltöltéséhez. • Felhasználói beállítások: Profiladatok megtekintése és személyes adatok módosítása. • Kapcsolatok: A csatlakoztatott gondozók listájának kezelése. • Támogatás: Információk megtekintése, például Közlemények, GYIK, Lépjen kapcsolatba velünk és Megfelelés. • Gyorselérési sáv: A Sens365 alkalmazás telepítése vagy az egészségügyi szakember hitelesítésének elvégzése.
❸	**Alsó terület**	• i-SENS weboldal gyorselérése • Felhasználási feltételek • Adatvédelmi irányelvek • Süti kezelés • Feltöltőszoftver • Nyelvi beállítások

3.3 Jelentések megtekintése

1 A jelentésképernyő megnyitásához kattintson a bal felső menüben a **Jelentés** elemre.

2 A jelentés tetején található ikonok segítségével az alábbi műveletek végezhetők el.




Sz.	Név	Leírás
❶	**Céltartomány beállításai**	A jelentésben megjelenített cél glükóztartomány módosítása.
❷	**Időszak**	A jelentés megtekintési időszakának módosítása.
❸		Az AGP riport másolása szövegként.
❹		A jelentés tartalmának mentése, nyomtatása vagy továbbítása.
❺		A jelentés tartalmának exportálása Excelbe.

3 Ezen az oldalon az alábbi jelentésekre kattintva tekintheti meg a kapcsolódó információkat.

- Áttekintés, AGP, Összehasonlítás, Mintázatok, Trendek, Statisztikák, Események

Áttekintés

A kiválasztott időszakra vonatkozóan az alábbi glükózszint mérőszámok és kulcsfontosságú információk – például inzulin- és szenzoradatok – állnak rendelkezésre.

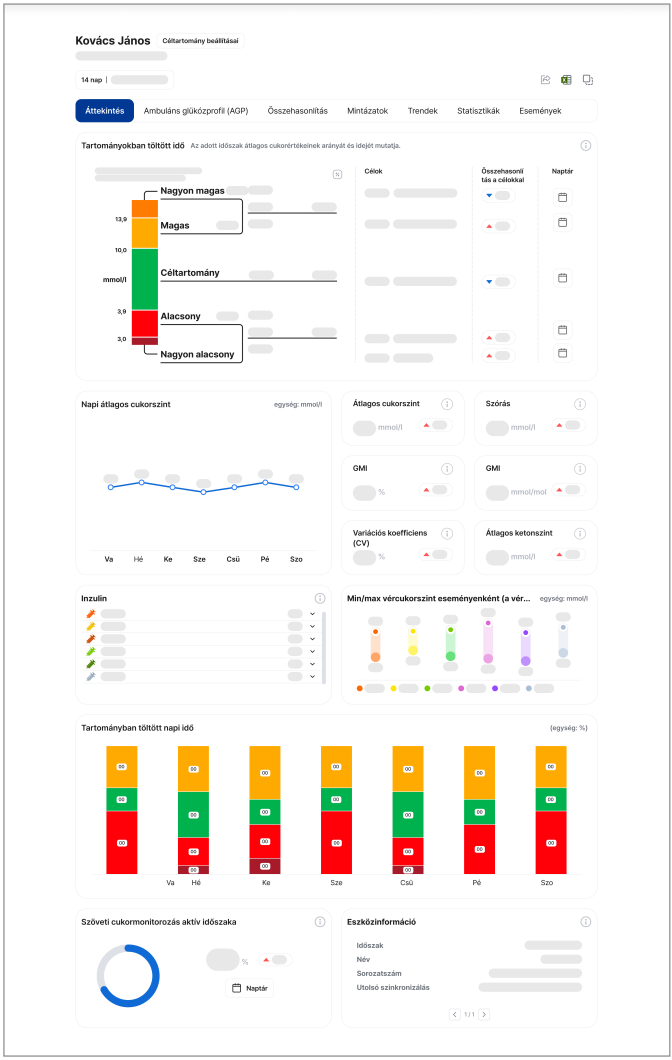


Név	Leírás
Tartományokban töltött idő	Megjeleníti, hogy a kiválasztott időszakban a glükózszint az idő hány százalékában volt az egyes tartományokban. • Céltartomány: Azt jelzi, hogy a glükózszint az idő hány százalékában maradt a cél glükóztartományon belül. • Alacsony / Nagyon alacsony: Azt jelzi, hogy a glükózértékek az idő hány százalékában voltak a céltartománynál alacsonyabbak vagy jelentősen alacsonyabbak. • Magas / Nagyon magas: Azt jelzi, hogy a glükózértékek az idő hány százalékában voltak a céltartománynál magasabbak vagy jelentősen magasabbak.
Napi átlagos cukorszint	A kiválasztott időszak átlagos glükózértékeit a hét napjai szerinti bontásban jeleníti meg.
Átlagos cukorszint	A kiválasztott időszak átlagos glükózértéke.
Szórás (SD)	Egy numerikus érték, amely megmutatja, hogy a mért glükózszintek mennyire térnek el az átlagtól. Az alacsonyabb érték azt jelzi, hogy a glükózszint egyenletesebb tartományban marad.
Glükózmenedzsment indikátor (GMI)	A kiválasztott időszak átlagos glükózértéke alapján a becsült glikált hemoglobin (A1C) szintet adja meg.
Variációs koefficiens (CV)	Egy százalékos érték (%), amelyet a szórás és az átlagos glükózérték hányadosaként számolunk, és a kiválasztott időszakban mért glükózértékek ingadozásának mértékét jelzi.
Átlagos ketonszint	A kiválasztott időszak átlagos ketonértéke.
Inzulin	Az inzulin teljes napi adagját típusonként jeleníti meg.
Min/max vércukorszint eseményenként (a vércukormérési adatok alapján)	Megjeleníti az események szerinti minimális és maximális glükózértékeket az egyéni vércukormérővel mért adatok alapján.
Tartományban töltött napi idő	Megjeleníti a céltartományokban töltött idő százalékos arányát a hét napjai szerint.

Név	Leírás
Szöveti cukormonitorozás aktív időszaka	A CGM-adatok gyűjtésének időtartama a jelentés teljes időtartamához viszonyítva, százalékban kifejezve.
Eszközinformáció	Megjeleníti az adott időszakban viselt szenzorral kapcsolatos információkat.
Glükóz–keton index (GKI)	A kiválasztott időszakban mért glükóz- és ketonszintek arányát jelenti. Ez az index a diabéteszhez, ketogén étrendhez és egyéb állapotokhoz kapcsolódó egészségi állapot nyomon követésére szolgál.
Napi átlagos étkezés	A kiválasztott időszak napi átlagos tápanyagbevitelét mutatja.
Napi átlagos testmozgás	A kiválasztott időszak napi átlagos edzésidejét mutatja edzésintenzitás szerint.

Ambuláns glükózprofil (AGP)

Az ambuláns glükózprofil (AGP) egy olyan jelentés, amely egy meghatározott időszak alatt gyűjtött glükózadatokat összegzi, és bemutatja a glükózszint napi alakulását. Megtekintheti a kiválasztott időszakra vonatkozó standard AGP jelentést.

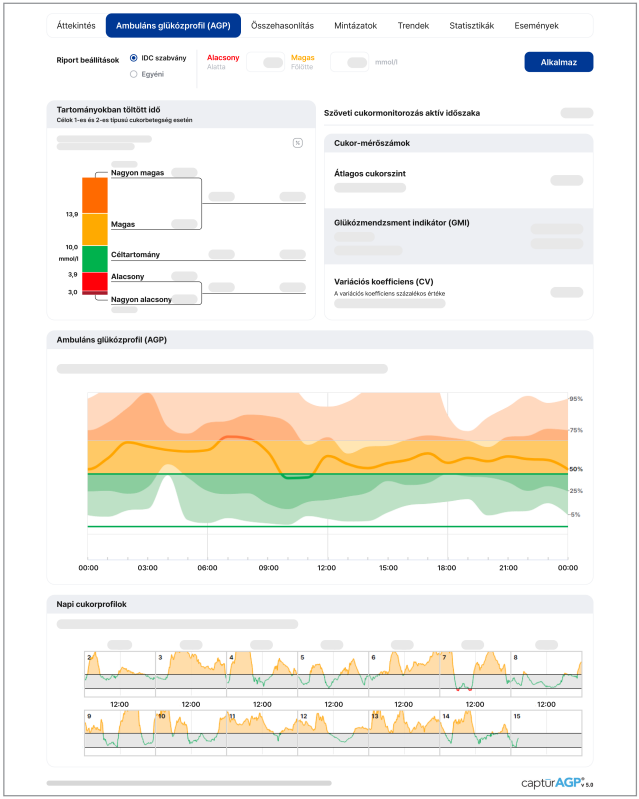


Név	Leírás
Riport beállítások	Az alacsony/magas küszöbértékek beállíthatók az IDC (International Diabetes Center) szabvány vagy egyéni igények szerint.
Ambuláns glükózprofil (AGP)	A megtekintési időszak során gyűjtött glükózértékek 24 órás profilba rendezve jelennek meg, a medián (50%) és percentilis tartományok feltüntetésével.
Napi cukorprofilok	Éjféltől éjfélig tartó időszakot jelenítenek meg.

Összehasonlítás


Két időszak grafikonjai egymás mellett jelennek meg, lehetővé téve a különböző időszakokra vonatkozó AGP-riportok összehasonlítását.

- Céltartományban töltött idő összehasonlítása
- Cukor-mérőszámok összehasonlítása (Variációs koefficiens (CV), Szórás, GMI, Átlagos cukorszint)
- Ambuláns glükózprofil (AGP) összehasonlítás

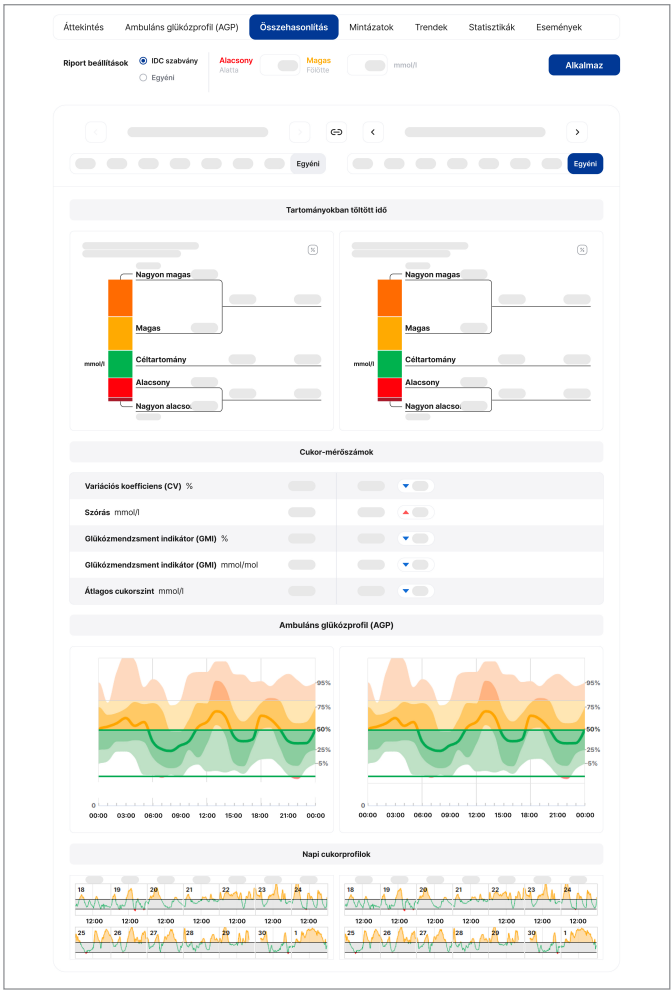


Mintázatok

A kiválasztott időszak napi grafikonjain megtekintheti az alacsony, cél- és magas glükóztartományok előfordulását, valamint a kapcsolódó eseményinformációkat.

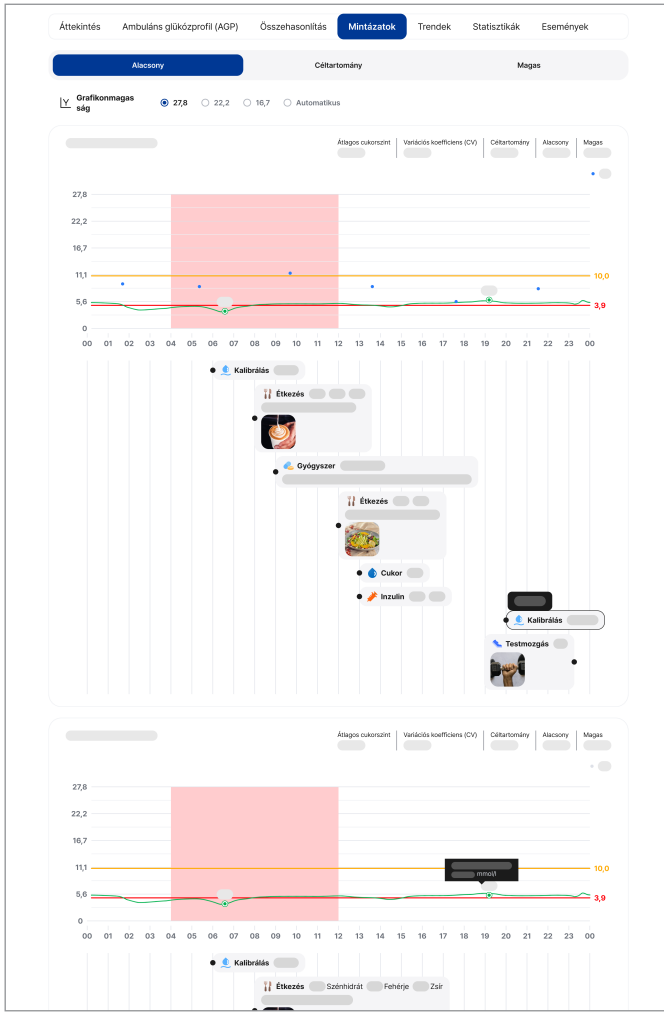

Trendek


Megtekintheti a kiválasztott időszak teljes glükózgörbéjét napi vagy heti bontásban, valamint a kapcsolódó eseményinformációkat.

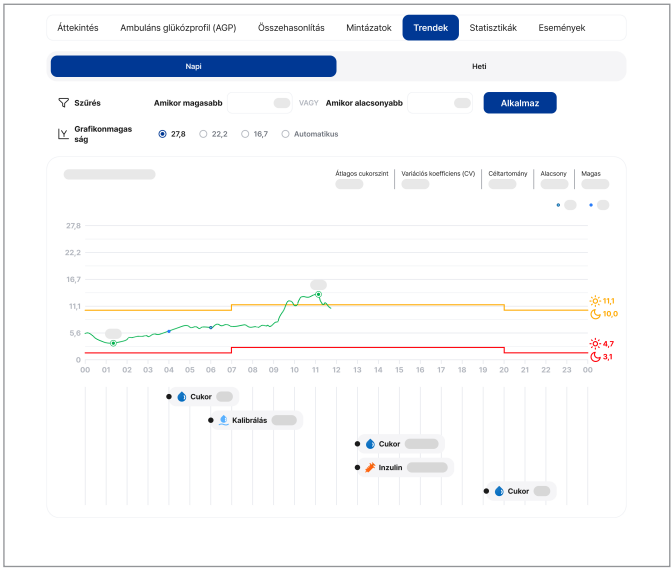

Statisztikák


A kiválasztott időszakra vonatkozó alábbi információk napi és órás bontásban állnak rendelkezésre:

- Tartományokban töltött idő
- Átlagos cukorszint
- Átlagos variációs koefficiens (CV)
- Folyamatos glükózmonitorozás átlagos aktív időszaka

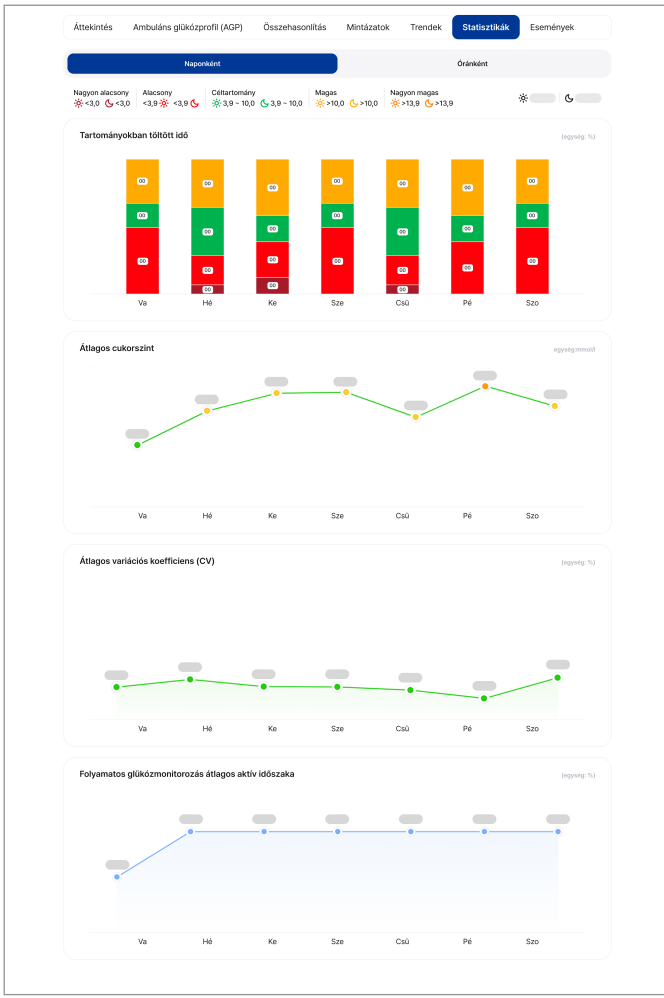

Események


A kiválasztott időszak során rögzített felhasználói események dátum szerint jelennek meg, és szűrhetőek eseménytípus szerint.

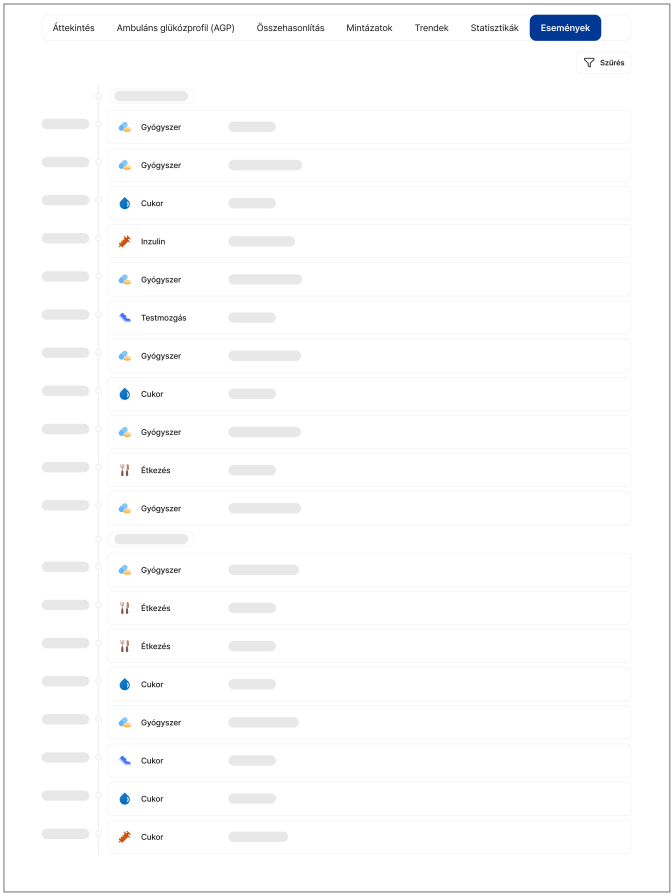

3.4 Beállítások

Profilinformációk módosítása

1 A személyes információk módosításához kattintson a jobb felső sarokban lévő profilra vagy a bal oldali menüben látható **Felhasználói beállítások** lehetőségre.

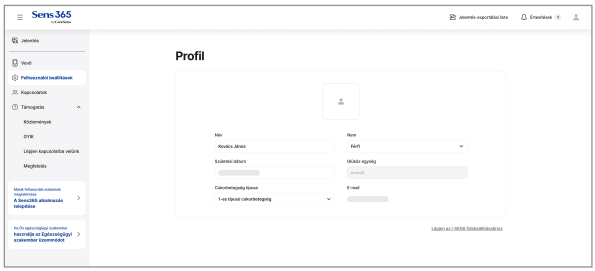


2 A szerkeszthető személyes információk a következők:

- Név
- Nem
- Születési dátum
- Cukorbetegség típusa

i-SENS-fiókok kezelése


A fiók kezeléséhez kattintson a „Profil” képernyőn a **Lépjen az i-SENS fiókbeállításokhoz** lehetőségre.

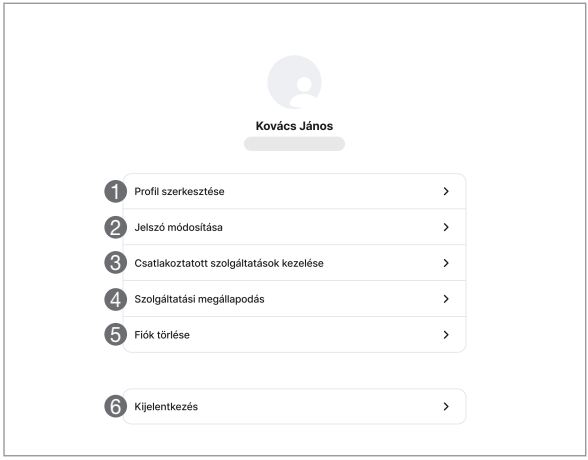

Sz.	Név	Leírás
❶	**Profil szerkesztése**	A regisztráció során megadott adatok megtekintése és frissítése.
❷	**Jelszó módosítása**	A jelszó módosítása új jelszóra.
❸	**Csatlakoztatott szolgáltatások kezelése**	Az aktuális fiókhoz kapcsolt szolgáltatások megtekintése és leválasztása.
❹	**Szolgáltatási megállapodás**	A felhasználási feltételek és szabályzatok áttekintése.
❺	**Fiók törlése**	A fiók törlésekor minden adat – beleértve a glükózadatokat is – törlésre kerül.
❻	**Kijelentkezés**	Kijelentkezés az i-SENS fiókból és szolgáltatásokból.

Gondozók kezelése

Adatait megoszthatja az Ön által kiválasztott gondozókkal. Az adatmegosztást bármikor megszüntetheti az adott gondozó hozzáférésének visszavonásával.

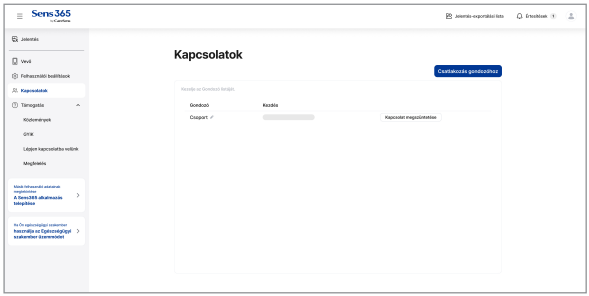

Gondozó csatlakoztatása

1. A **Kapcsolatok** elemre kattintva megjelenik azoknak a gondozóknak a listája, akikkel jelenleg megosztja az adatait.

2. Új gondozó csatlakoztatásához kattintson a **Csatlakozás gondozóhoz** gombra.

3. Adja meg annak a gondozónak a megosztási kódját, akivel meg szeretné osztani az adatait, majd kattintson a **Rendben** gombra.

4. A megosztási kód megadását követően a gondozóval való kapcsolat létrehozásához el kell fogadnia a vonatkozó hozzájárulásokat.

5. Ha a megadott megosztási kód érvényes, az egészségügyi szakember hozzáadásra kerül a gondozók listájához.

Gondozó leválasztása

1. Egy korábban csatlakoztatott gondozó leválasztásához kattintson a **Kapcsolat megszüntetése** gombra.

2. Amikor megjelenik az adatmegosztás megszüntetését megerősítő felugró ablak, kattintson az **Rendben** gombra. Az adott gondozóval való megosztás megszűnik.

3.5 A vevőkészülék csatlakoztatása


A vevőkészülék csatlakoztatása számítógéphez

1 A Sens365 és a CareSens Air vevőkészülék összekapcsolásához válassza a bal oldali menüben a **Vevő** lehetőséget.

- Nem bejelentkezett felhasználók esetén kattintson a Sens365 weboldal alján található **Feltöltőszoftver** elemre.
  (A nem bejelentkezett felhasználók csak a vevőkészülék szoftverfrissítési funkcióját használhatják.)

2 Ha a feltöltőszoftver nincs telepítve a számítógépen, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az operációs rendszerrel kompatibilis szoftver telepítéséhez. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a jobb oldalon található **Frissítés** gombra.

3 Ha a CareSens Air vevőkészülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez, csatlakoztassa a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően. Amikor a kapcsolat létrejött, kattintson a jobb alsó sarokban található **Rendben** gombra.

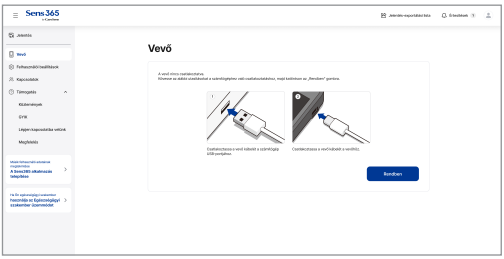


Megjegyzés

A termék elérhetősége országonként eltérő lehet. További információért forduljon a legközelebbi hivatalos forgalmazóhoz.

A vevőkészülék képernyőjének bemutatása

Az alábbi táblázat a CareSens Air vevőkészülék számítógéphez csatlakoztatásakor és a feltöltőszoftver telepítésekor megjelenő képernyőt ismerteti.

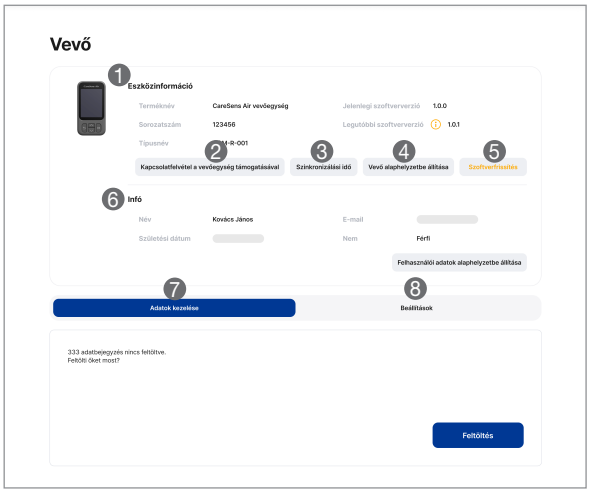

Sz.	Név	Leírás
❶	**Eszközinformáció**	Megjeleníti a csatlakoztatott vevőkészülék adatait, például a termék nevét, sorozatszámát, modellnevét és szoftververzióját.
❷	**Kapcsolatfelvétel a vevőegység támogatásával**	Probléma vagy kérdés esetén küldjön megkeresést a vevőkészülék használata közben. A megkeresés elküldésekor a csatlakoztatott vevőkészülék naplóadatai is továbbíthatók.
❸	**Szinkronizálási idő**	Szinkronizálja a vevő idejét a számítógép idejével.
❹	**Vevő alaphelyzetbe állítása**	A csatlakoztatott vevőkészülék visszaállítása.
❺	**Szoftverfrissítés**	• Frissíti a vevő szoftverét a legújabb verzióra. • A gomb akkor aktív, ha a csatlakoztatott vevőkészülék szoftvere nem a legfrissebb verzió.

Sz.	Név	Leírás
❻	**Infó**	Megjeleníti a hozzárendelt felhasználó adatait.
❼	**Adatok kezelése**	A Vevőkészülékben tárolt adatok feltöltése a Sens365 Webre.
❽	**Beállítások**	Az általános beállítások (nyelv, dátumformátum, időformátum stb.) és az értesítési beállítások ellenőrzése és módosítása.

A vevő funkcióinak áttekintése

A vevő adatainak feltöltése

1 A csatlakoztatott vevőkészülék felhasználói adatainak ellenőrzése a „Vevőkészülék” képernyőn. Ha nincs felhasználó kijelölve, kattintson a **Felhasználó kiválasztása** gombra a kijelöléshez.

- Egészségügyi szakemberek számára lásd: „4.6 Vevőkészülék-felhasználók kiválasztása”.

2 Kattintson az **Adatok kezelése** fülre.

- Az **Adatok kezelése** lapon látható a CareSens Air vevőkészüléken tárolt adatrekordok száma.

3 Kattintson a képernyő alján található **Feltöltés** gombra a CareSens Air vevőkészülék adatainak Sens365 Webre történő feltöltéséhez.

Megjegyzés

Az **Adatok kezelése** lap csak a bejelentkezett felhasználók számára látható.

Kapcsolatfelvétel a vevőegység támogatásával

1 Ha a vevőkészülék használata közben problémája adódik vagy kérdése van, kattintson a **Kapcsolatfelvétel a vevőegység támogatásával** gombra.

- A gomb csak akkor jelenik meg, ha a vevőkészülékhez felhasználó van kijelölve.

2 A tárgy és az üzenet megírása után jelölje be a naplóadatok küldése az Ügyfélszolgálat részére lehetőséget.

- A vevőkészülék naplóadatainak továbbítása kizárólag a **Kapcsolatfelvétel a vevőegység támogatásával** funkción keresztül érhető el.

3 A megkeresés elküldéséhez kattintson a felugró ablak alján található **Küldés** gombra.

4 A Sens365 Web használata (egészségügyi szakemberek)

Az egészségügyi szakemberek a Sens365 Weben keresztül nyomon követhetik a szenzorfelhasználók által megosztott glükózadatokat. A Sens365 Web egészségügyi szakemberek számára elérhető funkcióinak használatához egészségügyi szakemberként történő hitelesítés szükséges. A sikeres hitelesítést követően a Sens365 Web lehetővé teszi a szenzorfelhasználók adatainak biztonságos és hatékony kezelését.


Ez a fejezet a következőkhöz nyújt segítséget:

1. A csatlakoztatott szenzorfelhasználók listájának és jelentéseinek megtekintése.
2. Szenzorfelhasználó- és gondozócsoportok kezelése.

4.1 Átváltás szakmai fiókra


Egészségügyi szakember hitelesítése

1 Bejelentkezés után kattintson a bal oldali menü alján található egészségügyi szakember mód szalagra.

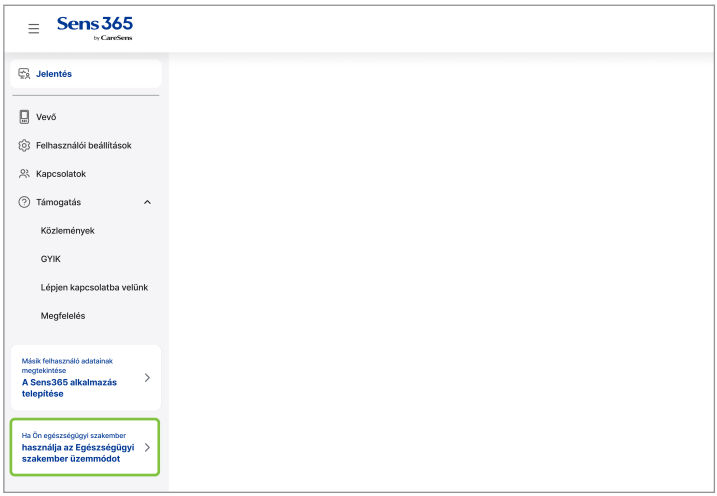

2 Amikor megjelenik az **Egészségügyi szakember hitelesítésének kérelmezése** felugró ablak, adja meg a nevét, valamint annak a kórháznak és osztálynak/tanszéknek a nevét, ahol dolgozik.

3 Az adatok megadását követően kattintson a **Kérés küldése e-mailben** gombra a hitelesítés igényléséhez.

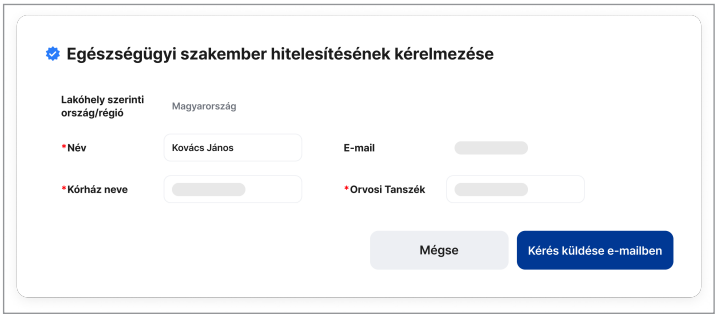


4 A kérelem jóváhagyását követően e-mailben és értesítésben tájékoztatjuk a hitelesítés befejezéséről.

5 A hitelesítést követően csatlakozzon újra a Sens365 Webhez, vagy kattintson a hitelesítés befejezéséről szóló értesítésben a **Használat most** gombra a szakmai fiókra való átváltáshoz.

4.2 Az egészségügyi szakemberek felületének bemutatása

Az alábbi táblázat a Sens365 Web kezdőképernyőjére történő bejelentkezés után megjelenő alapvető információkat ismerteti.

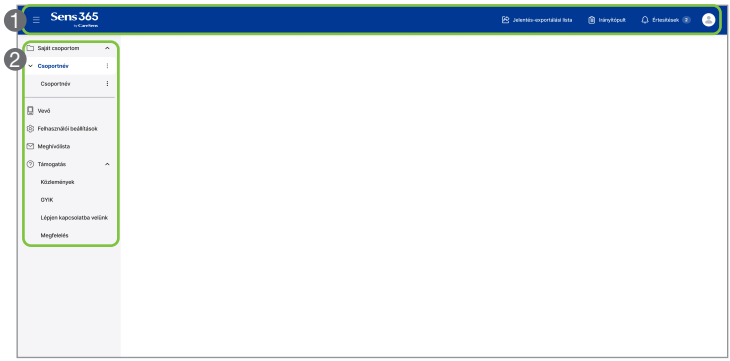


Sz.	Név	Leírás
❶	**Felső terület**	• Sens365 Kezdőlap gyorselérés: Ugrás a Sens365 kezdőlapjára. • Jelentés-exportálási lista: Jelentések hozzáadása és kezelése az exportlistában. • Irányítópult: Betegek hozzáadása és kezelése az irányítópulton. • Értesítések: Értesítési naplók megtekintése, például meghívási listák és közlemények. • Profil: Profiladatok megtekintése és személyes adatok módosítása.

Sz.	Név	Leírás
❷	**Bal oldali menü**	• Saját csoportom: Csoportok kezelése és az egyes csoportokhoz csatlakoztatott szenzorfelhasználók listájának megtekintése. • Vevő: Vevőkészülék csatlakoztatása a glükózadatok feltöltéséhez. • Felhasználói beállítások: Profiladatok megtekintése és alapbeállítások módosítása. • Meghívólista: Más egészségügyi szakemberektől érkező meghívások megtekintése az általuk kezelt betegcsoportokhoz. • Támogatás: Információk megtekintése, például Közlemények, GYIK, Lépjen kapcsolatba velünk és Megfelelés.

4.3 A csoportképernyő bemutatása

A bal oldali menüben egy csoport kiválasztásakor megjelenik az adott csoporthoz csatlakoztatott szenzorfelhasználók listája.

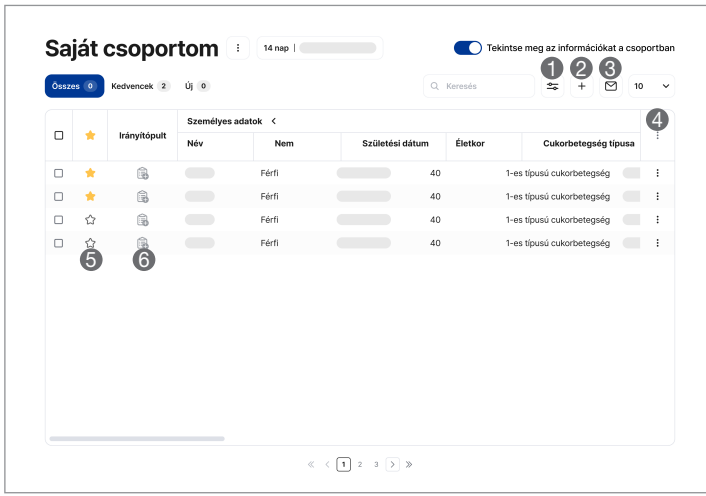

Sz.	Ikon	Leírás
❶		Szűrők alkalmazása a listára.
❷	+	Szenzorfelhasználó hozzáadása kapott megosztási kód használatával.
❸		Szenzorfelhasználók meghívása csoportmegosztási kód megadásával.
❹		A listában megjelenített információk szerkesztése.
❺		Szenzorfelhasználó hozzáadása a Kedvencekhez. A kedvencként megjelölt szenzorfelhasználók a Kedvencek lapon külön is megtekinthetők.
❻		Szenzorfelhasználók hozzáadása az Irányítópulthoz. Az Irányítópulthoz hozzáadott szenzorfelhasználók listája a felső részen található Irányítópult gombra kattintva tekinthető meg.

4.4 Csoportok kezelése

Csoportok hozzáadása

1 Kattintson a bal oldali menü csoportlistájában a ⋮ ikonra, majd válassza a **Csoport hozzáadása** lehetőséget.

2 Írja be a létrehozni kívánt csoport nevét.

3 A rendszer létrehoz egy csoportot a megadott névvel.

Szenzorfelhasználók meghívása

1 Szenzorfelhasználó csoportba történő meghívásához kattintson a csoport neve mellett jobb oldalon található ⋮ ikonra, majd válassza a **Szenzorfelhasználó meghívása** lehetőséget.

2 Ha megjelenik a **Szenzorfelhasználó meghívása** felugró ablak, adja meg a meghívott szenzorfelhasználó számára megjelenítendő csoportnevet, majd kattintson a **Következő** gombra.

3 Ellenőrizze a létrehozott megosztási kódot, majd kattintson az **E-mailes meghívó** lehetőségre.

4 E-mailes meghíváshoz adja meg a meghívni kívánt szenzorfelhasználó e-mail-címét, majd kattintson a **Küldés** gombra. Egyszerre legfeljebb 10 e-mailt küldhet el.

Egészségügyi szakember meghívása

1 Gondozók csoportba való meghívásához kattintson a csoport ⋮ ikonjára, majd az **Egészségügyi szakember meghívása** lehetőségre.

2 Amikor megjelenik az **Egészségügyi szakember meghívása** felugró ablak, adja meg a meghívni kívánt gondozó Sens365-fiókjához tartozó e-mail-címet, majd válassza ki a jogosultságait.

3 Tekintse át az **Egészségügyi szakember meghívása** felugró ablak alján található óvintézkedéseket, majd kattintson a **Meghívás** gombra.

4.5 A szenzorfelhasználók jelentésének megtekintése

1 Ha kiválaszt egy szenzorfelhasználót a csoportban, megtekintheti a kiválasztott szenzorfelhasználó jelentését.




2 Megtekintheti a felhasználó adatait, például a születési dátumot, nemet, Cukorbetegség típusa, Azonosító szám és a Hozzárendelt Gondozó.

3 Ellenőrizheti a szenzorfelhasználó által használt szenzorról származó legfrissebb glükózértékeket.

4 A jelentések megtekintésével kapcsolatos részletes információkért lásd: „3.3 Jelentések megtekintése”.

4.6 Vevőkészülék-felhasználók kiválasztása

A vevőkészülék adatainak kezeléséhez felhasználót kell kijelölni.

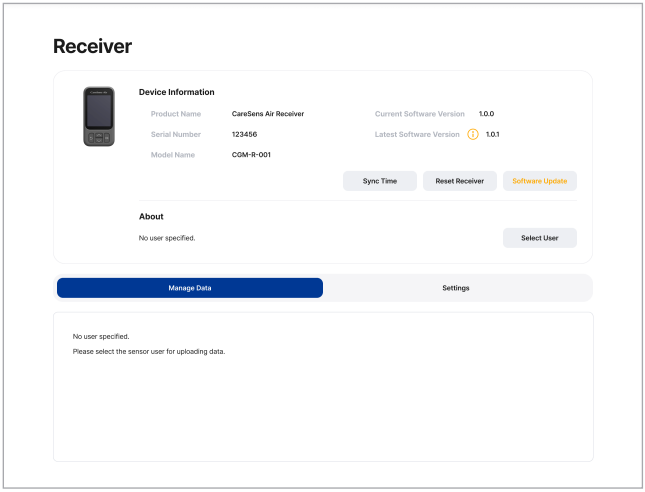

1 Kattintson a **Felhasználó kiválasztása** gombra a „Vevő” képernyőn. A vevőkészülék csatlakoztatásának lépéseihez lásd: „3.5 A vevőkészülék csatlakoztatása”.

2 A felugró ablak megjelenésekor kiválaszthatja azt a felhasználót, aki jogosult vevőkészülékhez rendelésre a csoporton belül csatlakoztatott szenzorfelhasználók közül.

A. függelék – Inaktív fiókra vonatkozó szabályzat

A Sens365 inaktív fiókokra vonatkozó szabályzata

A Sens365 azokat a felhasználókat, akik 1 éven keresztül nem használják a szolgáltatást, inaktív fiókká alakítja. A folyamat során a személyes adatok elkülönítve kerülnek tárolásra és biztonságosan védettek. Az elkülönítve tárolt személyes adatokat 1 évig őrizzük meg, és – ha jogszabály másként nem rendelkezik – ezt követően megsemmisíthetők.

Az i-SENS az inaktiválásra kijelölt felhasználókat legalább 30 nappal az átalakítás előtt tájékoztatja az ütemezett inaktiválási dátumról és az elkülönítve tárolt személyes adatok köréről, például e-mail útján.

Ha nem szeretné, hogy fiókja inaktív állapotba kerüljön, az átalakítás előtt jelentkezzen be a szolgáltatásba. Amennyiben személyes adatai az inaktív fiókká alakítást követően még nem kerültek megsemmisítésre, bejelentkezhet, megadhatja hozzájárulását, helyreállíthatja inaktív fiókját, és a szolgáltatást a megszokott módon tovább használhatja.

A szenzorfelhasználók adatainak védelme

- A Sens365-ben tárolt személyes és érzékeny információk titkosítva vannak. Az adatátvitel során a Secure Sockets Layer (SSL) protokoll biztosítja az adatok titkosságát és sértetlenségét, védelmet nyújtva az illetéktelen hozzáféréssel és módosítással szemben.
- A csoporthoz hozzáadott szenzorfelhasználók adataihoz való hozzáférés korlátozott, így azokat kizárólag az adott csoporthoz tartozó egészségügyi szakemberek tekinthetik meg.

B. függelék Technikai információk

B.1 Teljesítmény

Webböngésző: HS-FE-01

Termék neve	Sens365
Kompatibilis orvostechnikai eszközök	CareSens Air CGM rendszer
Kommunikációs környezet	Kommunikációs protokoll: HTTPS
Működési környezet:	• Javasolt böngésző: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari • OS (operációs rendszer) verziója: Windows 10 vagy újabb, Mac OS 11 vagy újabb • Felbontás: 1280 × 800 képpont vagy nagyobb
Küldött és fogadott adatok	• Egy kompatibilis orvostechnikai eszköz felhasználójának folyamatos glükózértékei, valamint a felhasználó által bevitt adatok (étkezések, inzulin, testedzés stb.) • A felhasználó adatainak statisztikái és riportjai, amelyek a kompatibilis orvostechnikai eszköz felhasználójának glükózértékeit is tartalmazzák.

Fő teljesítmény	• Az alkalmazást használó gondozók (családtagok, gyámok, egészségügyi intézmények) a kompatibilis orvostechnikai eszköz felhasználójának felhasználói hálózatához csatlakozva megosztott adatokat fogadhatnak. • Statisztikákat jelenít meg a kompatibilis orvostechnikai eszköz felhasználójának adataiból, és jelentéseket ment el. • Megjeleníti egy kompatibilis orvostechnikai eszköz felhasználójának folyamatos cukorértékeit és a felhasználó által bevitt adatokat.
Szoftververzió	Verzió: 1.1.x

B.2 Kiberbiztonság

Kiberfenyegetésekkel kapcsolatos figyelmeztetések

- Telepítsen vírusvédelmi vagy vírusirtó szoftvert az okoseszközére (akár Windows vagy Mac OS használ) annak megakadályozására, hogy rosszindulatú programok hozzáférjenek az okoseszköze információihoz.
- Ha a megosztási kód megadása ellenére sem tud cukorértékeket fogadni a szenzorfelhasználóktól, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a hat számjegyből álló kódot. Ha ugyanez a probléma a helyes megosztási kód megadása mellett is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a telefonon vagy e-mailen keresztül.
- Ha a rendszer kijelentkeztette amiatt, hogy egy másik eszköz van bejelentkezve, akkor módosítsa a jelszavát, ha nem Ön volt az, aki a bejelentkezést kezdeményezte.
- Ha öt alkalomnál többször rossz jelszót ad meg, állítsa vissza a jelszavát.
- Ha 1 évnél hosszabb ideig nem használta a felhasználói fiókját, a fiók inaktívvá válik. Ha a fiókja inaktívvá vált, akkor újra kell aktiválnia.
- Ha a Sens365-höz kapcsolódóan kiberbiztonsági esemény merül fel, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos forgalmazóval és az illetékes hatósággal.
- A Sens365 használata során a biztonságos internet-hozzáférés érdekében használjon megbízható
  Wi-Fi-hálózatot (például otthoni vagy munkahelyi hálózatot), vagy biztonságos kapcsolatot egy megbízható VPN-szolgáltatáson keresztül. Kerülje a nem biztonságos nyilvános Wi-Fi-hálózatok használatát, beleértve az olyan vendéghálózatokat, mint amelyek otthonokban, éttermekben, iskolákban, könyvtárakban, szállodákban, repülőtereken vagy repülőgépeken érhetők el. Ezek a hálózatok nem feltétlenül rendelkeznek megfelelő biztonsági intézkedésekkel, és potenciálisan kiberbiztonsági kockázatoknak, például rosszindulatú szoftvereknek vagy jogosulatlan hozzáférésnek tehetik ki a Sens365 rendszert.

Kiberfenyegetésekkel kapcsolatos védelem

- Amint a felhasználói adataik hitelesítése megtörtént, a rendszer egy tokent állít ki a felhasználó számára.
- A rendszer minden egyes kérésnél ellenőrzi a token érvényességét, és ezt követően dolgozza fel a hitelesítést.
- Adatok küldéséhez a rendszer az SSL-kommunikációs módszert használja.
- A személyes információk titkosítására a rendszer AES-kódot használ, és az adatokat egy adatbázisba menti.

i·sens

i-SENS, Inc.
43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646
Republic of Korea
CareSensAir.com

EU REP **Medical Technology Promedt Consulting GmbH**
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Germany

© 2026 i-SENS, Inc. Minden jog fenntartva.
PCGAA-000062 REV0 2026-09

CE 0123 MD