

CareSensTM Air

Kalibráció tanácsok



77 ELEKTRONIKA

Kalibráció: választás szerint


A CareSens Air® szöveti cukorszensor a jövőben **nem igényel kötelező kalibrációt**, azonban kalibrációs érték bevitelre, ezáltal a mért értékek korrekciójára továbbra is van lehetőség.



Kalibrálási lehetőség


Fontos!

A bemelegedés utáni első 12 órában tapasztalhat átmeneti pontatlanságokat a szenzor értékekben, ezért használjon vércukorszintmérőt a terápiás döntéshozatalra!

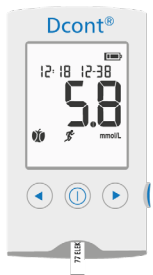

Mikor kalibráljon?

Ha korrigálni szeretné a szenzor mérési adatait, adjon meg vércukorszintmérővel mért kalibrációs értéket az alkalmazásban.

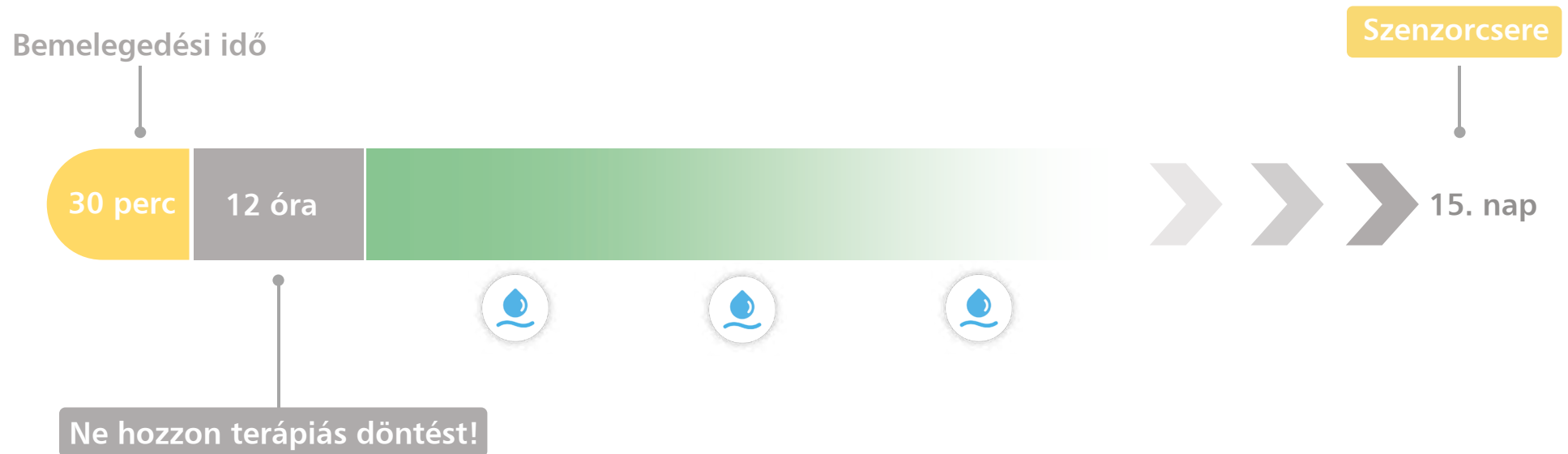

Ha úgy érzi, hogy a CareSens Air[®] szenzor értékek nem tükrözik a valós egészségi állapotát, ellenőrizze vércukorszintjét.

Fontos!

Csak stabil vércukorszint mellett kalibráljon!



Mikor kalibráljon? További tippek.

A szenzor viselés első 2 napjában (de különösen a bemelegedés utáni első 12 órában) a mérési értékek némileg instabilak lehetnek a szervezet immunválasza miatt. Ebben az időszakban nem javasoljuk a kalibrációs értékek megadását, mert az további pontatlanságokat okozhat, amit később ismételt kalibrációval tud korrigálni.

Ha a szenzor viselés első 1-2 napjában mégis megad kalibrációs értéket a pontosság javítása érdekében, a CareSens Air szenzor maximális pontosságát akkor érheti el, ha 5 napon keresztül naponta egyszer kalibrál stabil vércukorszint mellett.

Javaslat:

12-24 órával a szenzor indítása előtt felhelyezett szenzor esetében a kezdeti átmeneti pontatlanságok csökkenthetők.

Fontos!



Csak stabil vércukorszint mellett kalibráljon!

Kalibrációs tanácsok - Mikor ne kalibráljon?

Mikor ne kalibráljon

Amikor a cukorszintje változásban van, azaz nem stabil: étkezés-, gyógyszer/inzulin beadás, testmozgás/sportolás után 2 órán belül.

Amennyiben a kezdőképernyőn a trendnyíl emelkedő, vagy csökkenő, várja meg, míg a trendnyíl vízszintes lesz.

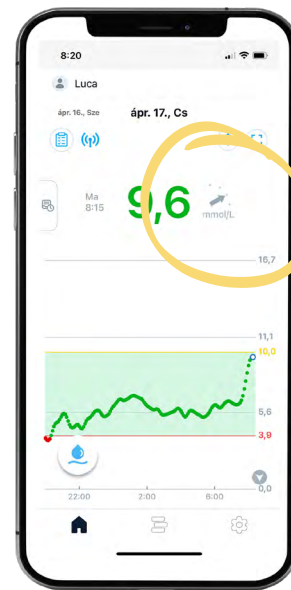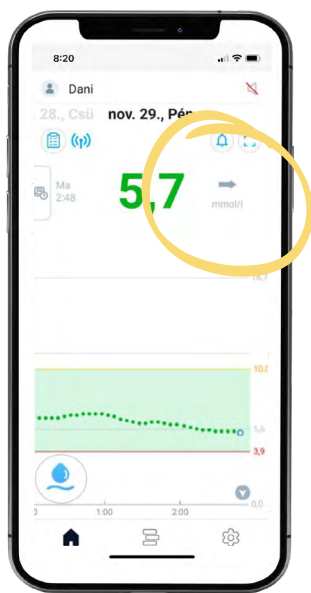

Abban az esetben, amikor a cukorszintje változásban van, a vércukorszint és a szöveti cukorszint nincs egyensúlyban. Ha ilyen esetekben végez kalibrációt, a CareSens Air® rendszer méréseibe pontatlanságot vihet be.